



Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Rehabilitationszentrum Häring, A-6323 Bad Häring
Leiter des Pflegedienstes: Pfl.Dir. H.Fankhauser

Praxisbericht über die Anwendung von

„AUTONOM“

Umgebungssteuerung u. Kommunikation

Hubert Fankhauser

Computerunterstützte Umgebungssteuerung und Kommunikationshilfe

AUTONOM



Einsatz von AUTONOM

Bei hochquerschnittgelähmten Patienten,



bei welchen keine Sprachsteuerung einsetzbar ist.


Im Bereiche des Patientenzimmers

AUTONOM: Anwendungsbeispiele

- Steuerung von
- Hilferuf
 - Bettfunktion
 - Licht, Buch
 - Telefon (Speicherplätze)
 - Tür, Fenster, Jalousie, Vorhang
 - Ventilator, Heizung, Klima, Gerät
 - Radio / CD / Kassette / Verstärker
 - Fernseher / Teletext / Videorecorder

AUTONOM: Anwendungsbeispiele

Steuerung auch von
vielen anderen
elektrischen Geräten
möglich

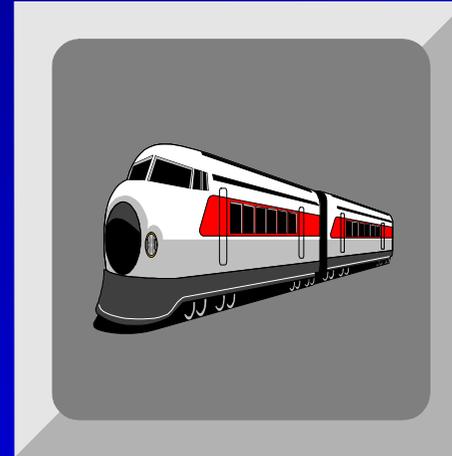

AUTONOM: Anwendungsbeispiele

Die **Programmierung** von automatisch abzuarbeitenden Schritten ist einfach möglich.





Z.B. wenn ein Telefonanruf angenommen wird:

- stoppe die Eisenbahn*
- schalte den CD-Player auf Pause*
- hebe Telefon ab*

AUTONOM: Anwendungsbeispiele

Unterstützung bei der Kommunikation

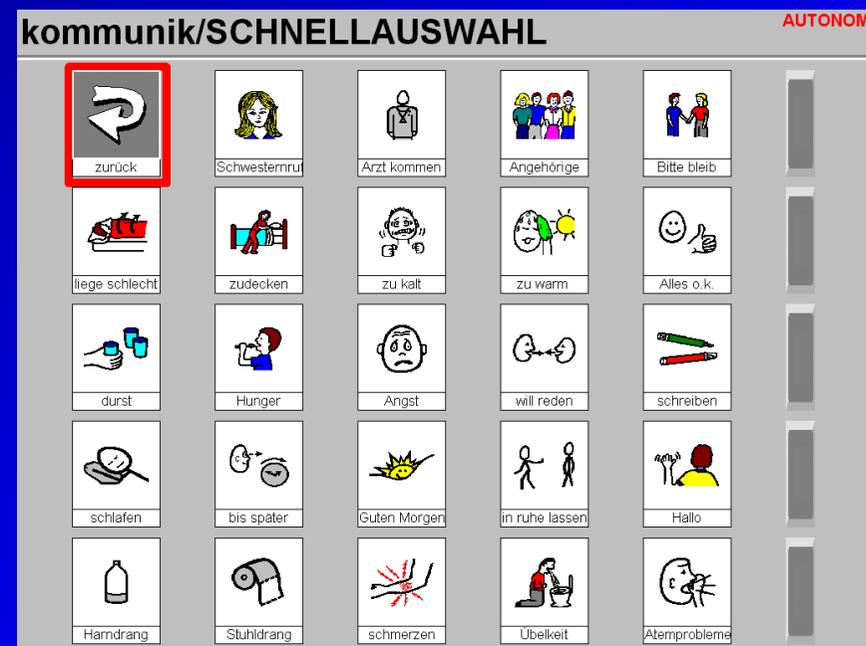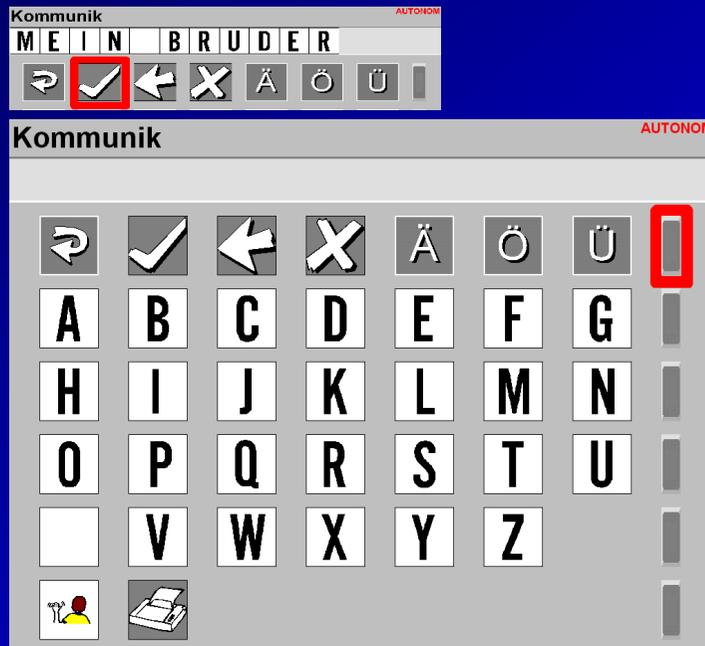

Diverse Hilfsmittel



Beistelltisch
hydraulisch
höhenverstellbar

von 70 - 99 cm



IR-Steuereinheit

für Schwesternruf, Licht
u. Telefon




für die
Bettfunktionen




Eingabekomponenten


1-fach Großflächentaster

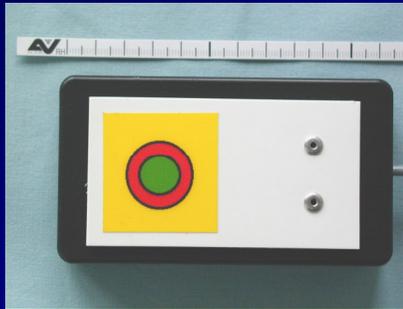

2-fach Einhandtaster

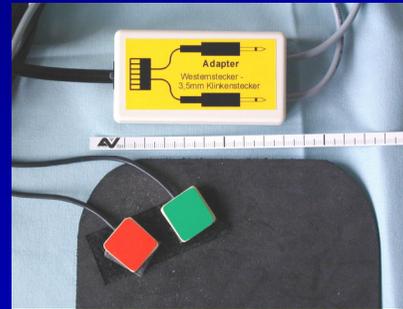

5-fach Einhandtaster

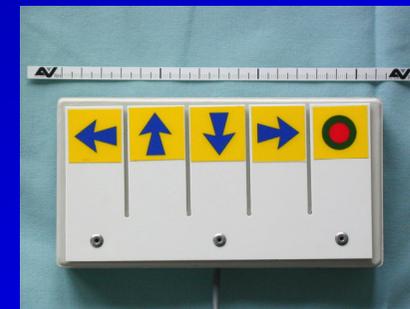


Joystik
für Kinnsteuerung



Eingabekomponenten



Saug-/Blas-Schalter
mit stufenlos einstellbarem
Saug- Blaswiderstand
(0,5 - 34,0 kPa)

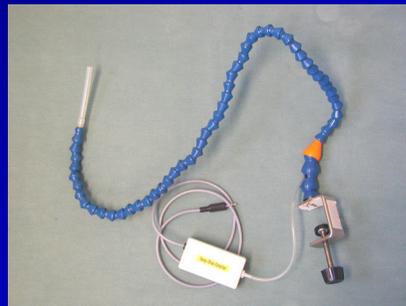

**Kunststoff-
Gliedergelenk-Schlauch**
zur Führung des
Schlauches u.
Mundstückes



**Saug-/Blas-Mau
"Integra Mouse"**

Menü-Konfigurationsbeispiele

Hauptmenü

AUTONOM



Schwesternru




Telefon




Licht



Bettfunktion


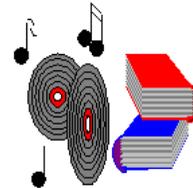


Unterhaltung

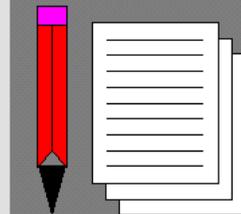


Kommunik

Menü-Konfigurationsbeispiele Telefon

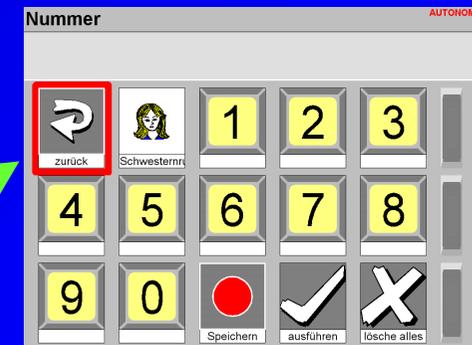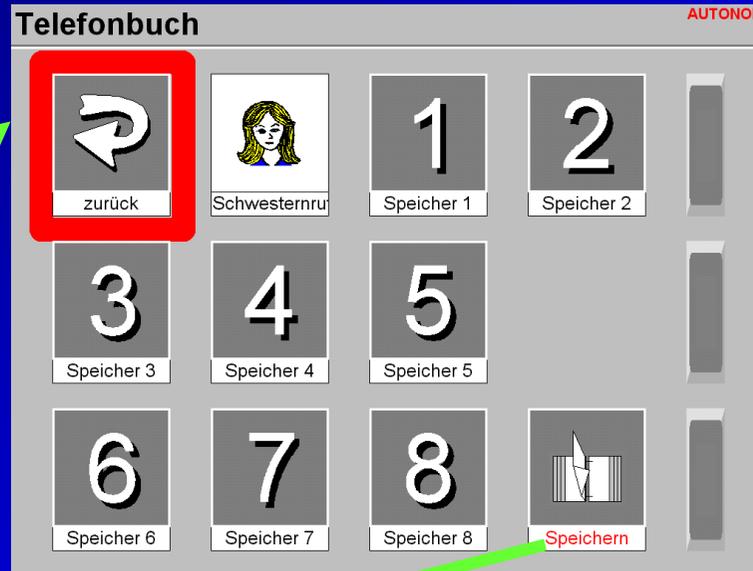




Menü-Konfigurationsbeispiele

Bettfunktion

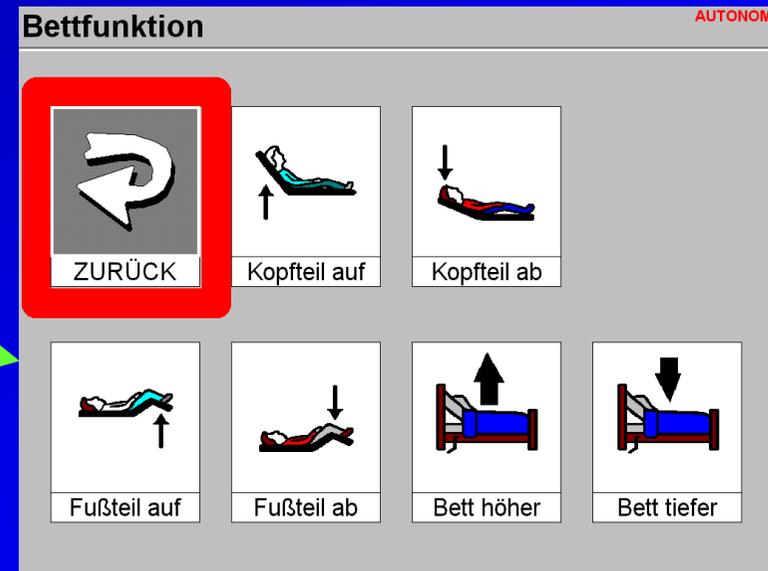



Menü-Konfigurationsbeispiele

Fernseher / Teletext

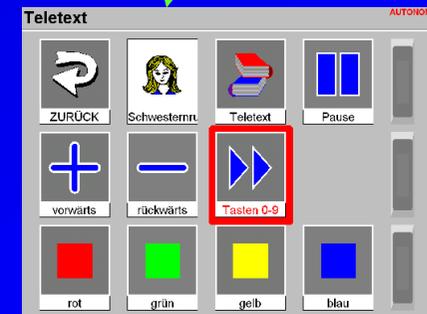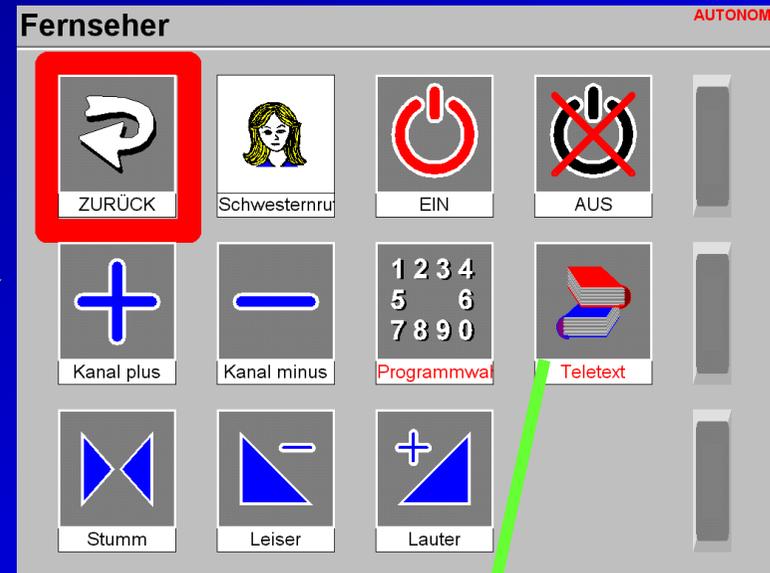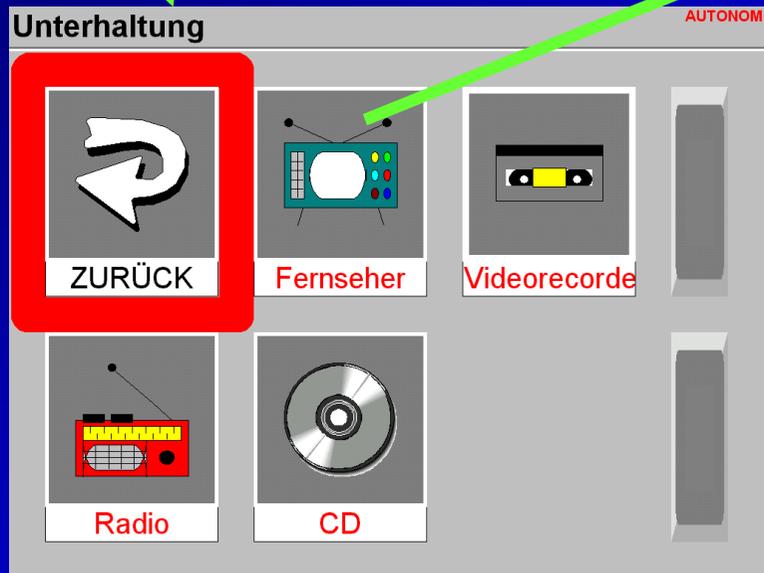

Menü-Konfigurationsbeispiele

Kommunikation

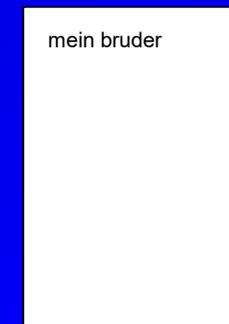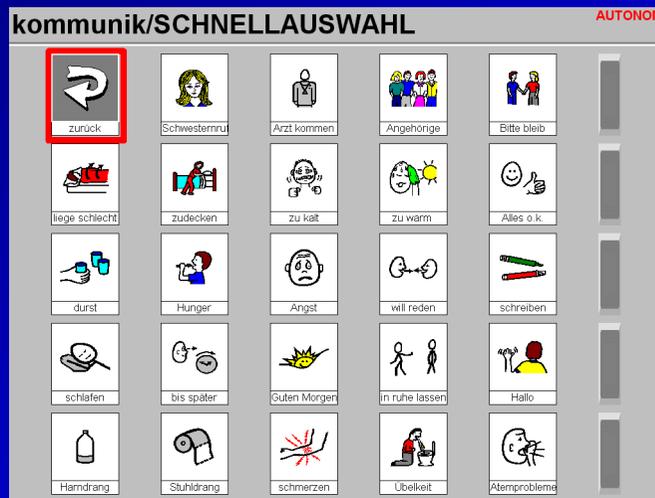

Handbuch AUTONOM



RHP AUTONOM 04/01

Inhaltsübersicht

Allgemein	A
Menü-Konfiguration RZ-Häring	B
Menübeschreibung Kommunikation u. Telefon	C
Bedienung im 1-, 2- u. 5-Tasten-Modus	D
	E
IR-Codes	E
Konfigurations-Änderungen	F
Programm Installation	G

WUTONOMHandbuch.doc

Vertrieb in Österreich:

Fa. Meschik & Partner KEG

Firmware-Entwicklung Rehabilitationstechnik

Roschègasse 9 / RH 3

1110 Wien

Tel. u. FAX: 01 / 7688 059


Fa. mechatron

Schnabler & Partner Informationstechnik

Kapuzinergasse 6

3340 Waidhofen/Ybbs

Tel.: 07442 / 55 155 - 2177

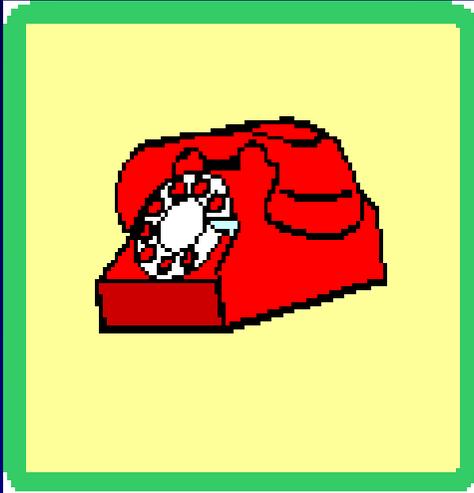

Hilfe

